

Radiofréquence à double profondeur
pour un remodelage dermique global

ELLISYS SENSE

ELLISYS SENSE



ELLISYS SENSE
Fractional RF Micro-Needle System

ELLISYS SENSE



DOUBLE IMPACT EN UNE SEULE IMPULSION

ELLISYS SENSE est un dispositif de radiofréquence microneedling de dernière génération, alliant technologie intelligente, sécurité et efficacité clinique. Il stimule le remodelage du collagène et améliore visiblement la texture, l'éclat et la fermeté de la peau — en une seule impulsion efficace.

DOUBLE SHOT INTELLIGENT

Plus rapide | Ciblage plus précis | Résultats visibles

Diffuse l'énergie RF sur deux couches cutanées en une seule impulsion, pour une pénétration plus profonde, un ciblage précis et un rajeunissement cutané visiblement renforcé.

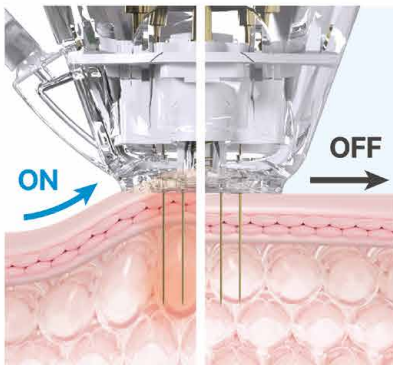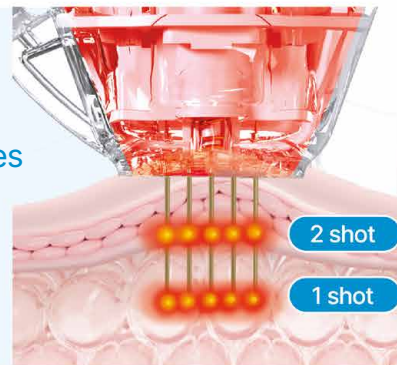

VACUUM INTELLIGENT

Contact précis | Diffusion optimale

Assure un contact optimal avec la peau pour une profondeur d'aiguille précise et une diffusion homogène de l'énergie — idéal pour les zones relâchées comme le contour des yeux, des lèvres et le cou.

UNE ÉNERGIE RF ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN DE LA PEAU

1 MHz

Pénétration profonde et stimulation renforcée du collagène — Idéal pour lifter, raffermer et traiter les rides profondes

2 MHz

Action plus superficielle et amélioration du grain de peau — Parfait pour l'acné, les pores dilatés, les cicatrices et le lissage de la texture cutanée

UNE TECHNOLOGIE RF SUR MESURE

RF MONOPOLAIRE

Chauffe les couches profondes pour cibler les pores, l'acné et les points noirs.

RF BIPOLAIRE


Offre un raffermisssement global du visage en ciblant l'épiderme et le derme pour un contour plus net et une peau visiblement revitalisée.

ELLISYS SENSE

ELLISYS
Fractional RF Mic

UNE GAMME D'EMBOUTS D'AIGUILLES POUR CHAQUE INDICATION . . .

Le 36 PIN : idéal pour le corps

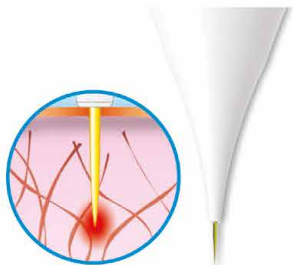


1 pin

- Type d'aiguille : Isolée
- Profondeur max. : 5,0 mm
- Indications : Acné, graisse de la paupière inférieure, syringomes, grains de milium, pores dilatés et points noirs




14 pin

- Type d'aiguille : non isolée
- Profondeur maximale : 3,5 mm
- Indications : vergetures, contour des yeux et de la bouche

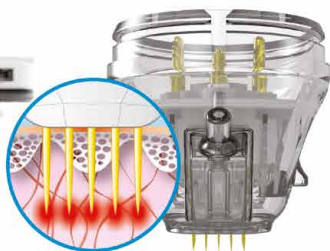


25 pin

- Type d'aiguille : isolée
- Profondeur maximale : 3,5 mm
- Indications : réjuvenation, ridules, cicatrices, pores dilatés, relâchement cutané — indiqué pour tous les phototypes

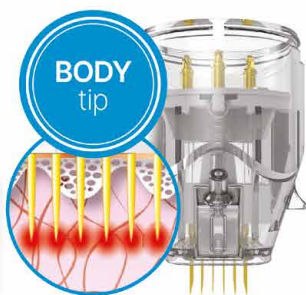

36 pin

- Type d'aiguille : isolée
- Profondeur maximale : 7,0 mm
- Bénéfice : raffermissement profond des tissus sous-cutanés
- Indications : abdomen, bras, cuisses (raffermissement et remodelage du corps)

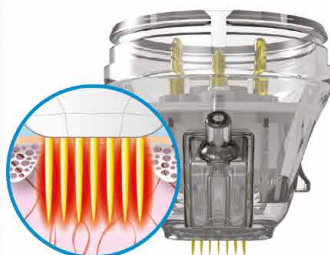

48 pin

- Type d'aiguille : non isolée
- Profondeur maximale : 3,5 mm
- Indications : réjuvenation, rides et ridules, vergetures, cicatrices, texture, pores — indiqué pour les peaux claires

Intelligent | Sûr | Performant



ELLISYS SENSE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	ELLISYS SENSE (CWM-930S)
Niveau RF	1 à 10
Fréquence RF	1 MHz & 2 MHz
Profondeur	Jusqu'à 5 mm en mode monopolaire Jusqu'à 3,5 mm en mode bipolaire Jusqu'à 7 mm pour le corps
Temps d'émission RF	10 à 900 ms
Dimensions	365 (L) × 505 (P) × 1555 (H) mm